

Visita di Controllo

La data della Sua visita di controllo è indicata nella sua lettera di dimissione, alla voce "follow up".

Ad ogni controllo porti sempre anche il trasformatore dell'apparecchiatura.

Se il medico decidesse di interrompere la terapia, l'apparecchiatura deve essere restituita integralmente al momento della disdetta del noleggio.



CONTATTI STRUTTURE

S.O.C. Chirurgia plastica

Segreteria

Telefono:

email: clinicachirurgioplastica@asufc.sanita.fvg.it

Reparto

Padiglione 5 - secondo piano

Telefono: 0432 552518

Ambulatorio

Padiglione 1 - secondo piano

Telefono: 0432 554028

Presidio Ospedaliero Universitario "Santa Maria della Misericordia"

P. le Santa Maria della Misericordia, 15
33100 Udine

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale

Sede legale: Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine

Pec: asufc@certsanita.fvg.it

Sito web: www.asufc.sanita.fvg.it

Azienda Sanitaria Informa: +39 0432 554440

Aggiornamento maggio 2023




ASU FC Azienda sanitaria
universitaria Friuli Centrale

DIPARTIMENTO TESTA-COLLO E NEUROSCIENZE

STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA CLINICA DI CHIRURGIA PLASTICA

TERAPIA A PRESSIONE NEGATIVA

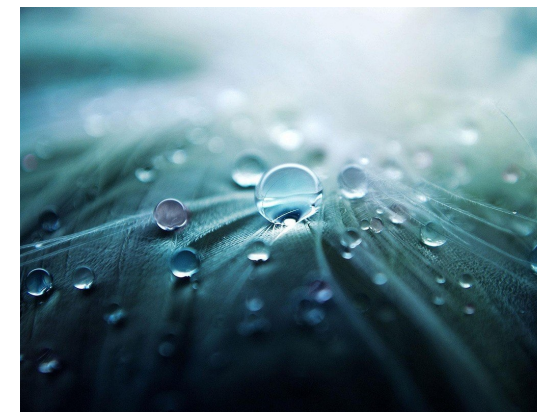

Informativa per il paziente

Cos'è la terapia topica negativa?

E' una terapia avanzata che consiste nell'applicazione di una pressione negativa (in aspirazione) controllata sul letto della lesione da trattare, in un intervallo che va dai 40 ai 125 mmHg. Il trattamento avviene attraverso una medicazione formata, di norma, da schiuma in poliuretano ricoperta da una pellicola trasparente, che impedisce ai batteri di raggiungere la ferita e "sigilla" l'area della lesione permettendo la creazione del vuoto.

L'effetto del trattamento ha le seguenti caratteristiche:

- retrazione della ferita;
- stimolazione della formazione del tessuto di granulazione;
- pulizia continua della ferita dopo il trattamento (sbrigliamento) chirurgico;
- rimozione continua di fluido interstiziale (essudato);
- riduzione dell'edema interstiziale.

La prescrizione per la scelta e la durata di questo tipo di terapia è sempre medica.

Tale terapia è indicata per trattamenti di lesioni traumatiche, croniche, o in fase di preparazione del letto tissutale per la ricostruzione con innesto.

L'apparecchiatura portatile che le è stata consegnata ha lo scopo di favorire la sua autonomia nelle attività di vita quotidiana.

Che cosa devo osservare?

- **Verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura:** il display è acceso, non ci sono allarmi in corso e la macchina non è scollegata o non funzionante, la medicazione è costantemente sotto vuoto;
- **Osservare che il contenitore di raccolta dei liquidi non sia completamente riempito** (se nota un riempimento anomalo, veloce, prima del prossimo appuntamento, ci avvisi);
- **Evitare di esporre l'apparecchiatura all'acqua** e di effettuare docce, per il tempo del trattamento;
- **Evitare di esporre l'apparecchiatura a colpi/cadute** che la potrebbero danneggiare;
- **Tenere l'apparecchiatura su una sedia accanto al letto o alla poltrona su cui è seduto.** In caso si debba mobilizzare ricordi di utilizzare la tracolla che le abbiamo fornito.
- **Tenere l'apparecchiatura in carica** - quando non deve spostarsi - (la batteria ha un'autonomia di durata tra le 14 e le 20 ore) attraverso il trasformatore che Le abbiamo fornito

Come mi comporto in caso di allarme?

In presenza di dolore, evidente arrossamento della ferita, interruzione del funzionamento o attivazione di un allarme (in questo caso verifichi cosa è indicato sul display - di norma tutte le apparecchiature riportano la definizione dell'allarme in corso) ci contatti tempestivamente ai seguenti numeri:

**presso l'ambulatorio di reparto
dalle ore 07:30 alle ore 14:30
da lunedì a venerdì 0432 554052**

**in tutte le altre fasce orarie
da lunedì a domenica 0432 552518**

In caso di **mancato funzionamento**, questo tipo di terapia **non può essere sospesa** nel caso dovrà essere rimosso e sostituito.

**IN NESSUN CASO
SPENGA AUTONOMAMENTE
L'APPARECCHIATURA PERCHÉ
POTREBBE COMPROMETTERE
IL SUO TRATTAMENTO**